

Manuál pro profesionální ústní sprchu

Waterpik Ultra Professional WP660

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 1
Popis produktu	str. 2
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 3
Doporučená technika	str. 5
Údržba, servis přístroje	str. 6
Likvidace	str. 6
Poruchy a jejich řešení	str. 7
Záruční doba	str. 7

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u Waterpik Ultra Professional WP660 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumísťujte a neskládujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
- NESAHĚJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:

- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností Waterpik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností Waterpik Technologies.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Nepoužívejte tekutiny, které obsahují pevné částice, jód nebo rostlinné silice. Použití těchto tekutin může snížit výkon výrobku, zkrátit jeho životnost, nebo výrobek poškodit.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!




Popis produktu

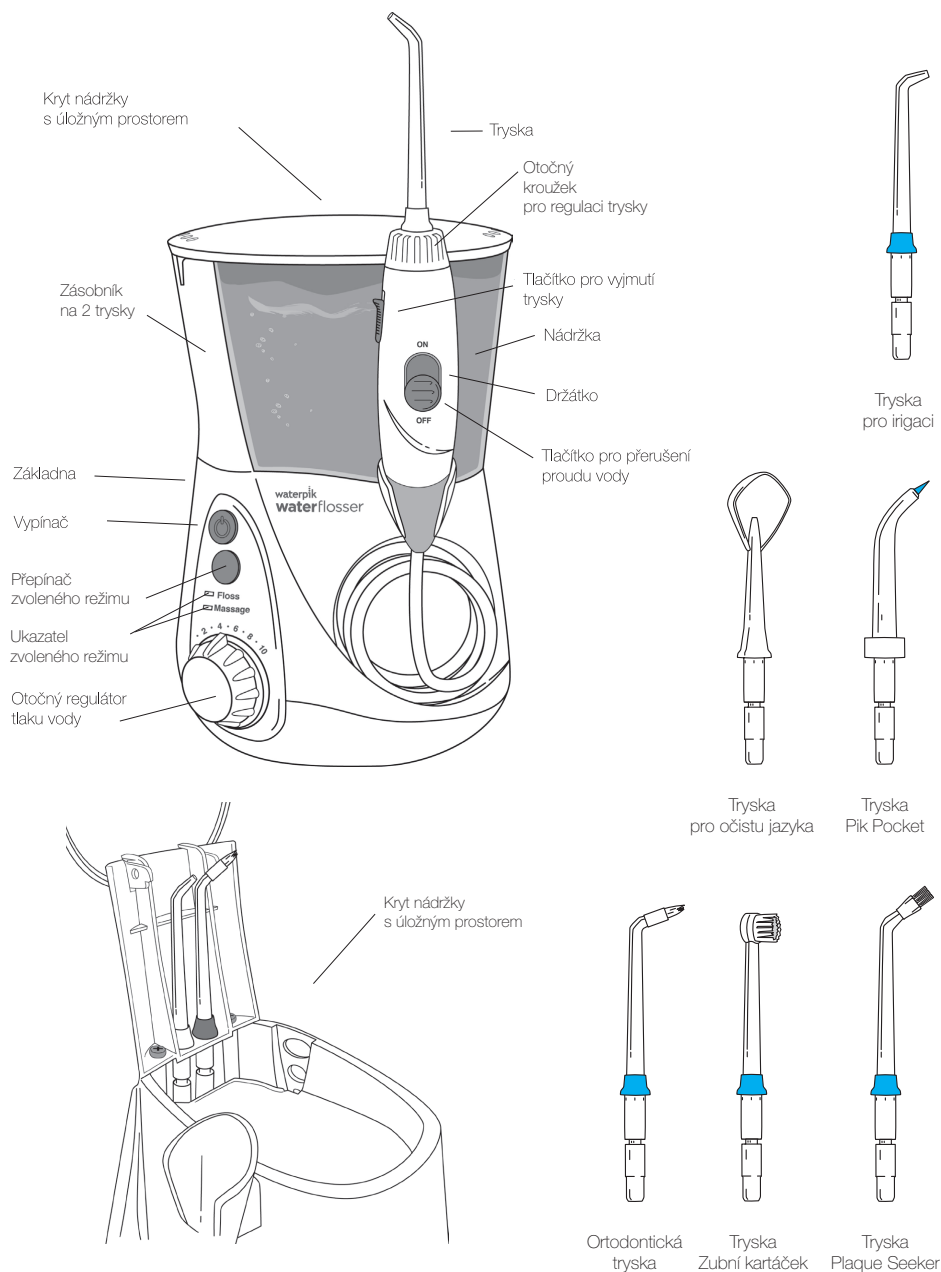

Použití ústní sprchy – začínáme


Před prvním použitím:

Před prvním zapnutím přístroje nastavte otočný regulátor tlaku na podstavci na nejvyšší hodnotu a namiřte trysku do umyvadla. Zapněte přístroj a vyčkejte, než bude z trysky proudit rovnoměrný, intenzivní proud. Následně můžete přístroj nastavit dle pokynů pro nastavení tlaku vody.

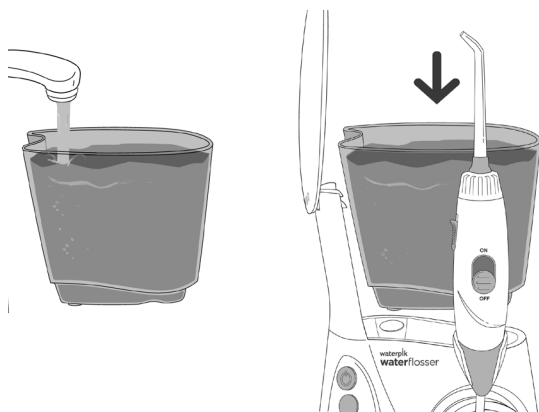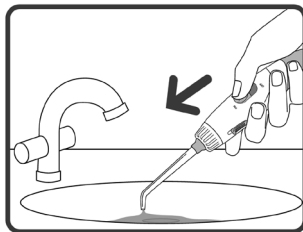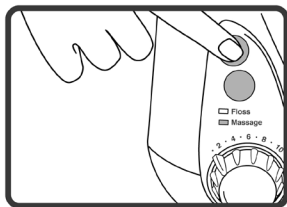

Nádrž:

Vyjměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou, do které můžete přidat ústní vodu nebo jiné antibakteriální či hojivé roztoky (viz. UPOZORNĚNÍ). Umístěte nádrž na základnu irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů. Po ukončení čištění vždy vylejte zbytek vody z nádržky a nádržku jemně položte na základnu irigátoru, nádržku již nepřítlačujte.

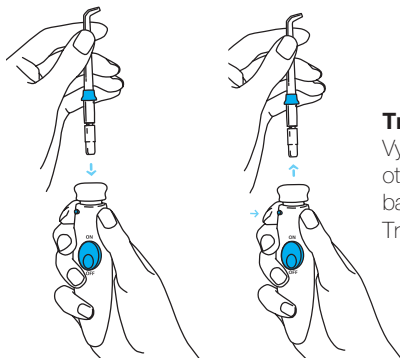

Trysky:

Vyberte si svoji barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryska správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka. Trysku vyjmete z držátka zmáčknutím tlačítka pro vyjmutí trysky.

Použití ústní sprchy – začínáme

Vložení trysky do úst:


Vložte trysku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Směr irigační trysky a vodního paprsku lze regulovat otáčením kroužku na konci držátka. Přepnutím tlačítka pro "přerušení proudu vody" můžete krátkodobě přerušit irigaci.



Nastavení tlaku vody:


Při prvním použití přístroje nastavte otočný regulátor tlaku na podstavci na nejnižší hodnotu. Při dalším použití postupně zvyšujte tlak vody na hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje nebo dle doporučení zubního lékaře.

Po zapnutí přístroje vám LED dioda signalizuje zvolený režim. Přepnutí režimu dojde zmáčknutím tlačítka nad světelným ukazatelem.

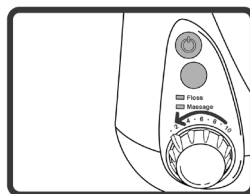

Minutový časovač

Časovač přístroje je nastaven tak, aby po intervalu 30 vteřin krátkým přerušením proudu vody upozornil, že je potřeba přejít k další části chrupu. Po 1 min. vás opět upozorní, že vypršel čas doporučený k čištění. Po této signalizaci bude přístroj pokračovat v provozu bez přestávk, až do jeho vypnutí. Časovač může být deaktivován.

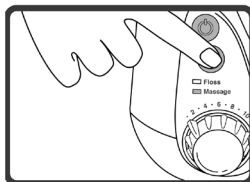

Postup pro deaktivaci:

Aktivace a deaktivace se provádí pouze když je přístroj vypnutý.

- 1) Stiskněte přepínač režimu (svítí zvolený režim Floss)
- 2) Stiskněte a přidržte tlačítko na cca 4 sekundy, dokud neblikne indikátor režimu masáže (Massage). Časovač je nyní deaktivován.
- 3) Stiskněte a přidržte tlačítko na cca 4 sekundy, dokud neblikne indikátor režimu irigace (Floss). Časovač je nyní opět aktivován.

Režim Hydro-Pulsní (Hydro -Pulse) masáž



Hydro-Pulsní masáž nabízí unikátní vodní pulsaci určenou k posílení a stimulaci dásní.

Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte nejprve režim irigace (Floss). Po tomto režimu přepněte přístroj do režimu masáže (Massage), upravte tlak vody na vám vyhovující, zaměřte proud vody na dásně a provádějte paprskem vody masáž v celých ústech.

Chcete-li zjistit, ve kterém režimu je přístroj nastaven když je vypnutý, stiskněte tlačítko režimu a LED světlo bude indikovat aktuální režim. Přepnutí režimu provedete zmáčknutím tlačítka pro změnu režimu. Režim můžete přepnout také během používání, když je přístroj zapnutý.

Doporučená technika

Ved'te vodní paprsek v pravém úhlu podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posuňte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostorů. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

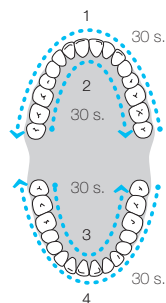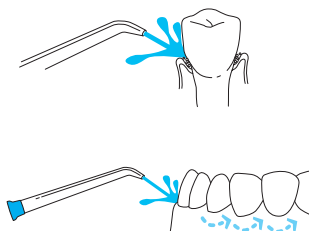


Tlačítko pro přerušení proudu vody:

Vypnutím tlačítka na rukojeti můžete proud vody dočasně zastavit. Motor bude ale nadále pracovat. Vhodné pro krátkodobé přerušení irigace.

Ukončení irigace:


Po ukončení irigace volnou rukou přístroj vypněte. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí trysky umístěné pod otočným kroužkem a hlavu trysky vytáhněte z násady irigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z el. zásuvky.

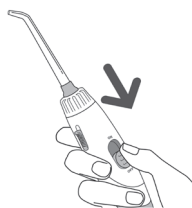

Speciální trysky:


Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zavedte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistíte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné parodontální choboty.

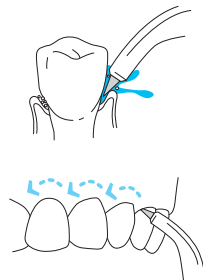

Tryska pro očistu jazyka

Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

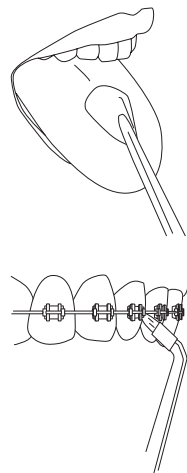

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných ploch okolo. Pulsující proud vody společně s kartáčkem na konci trysky vyčistí okolí drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou očistíte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která odstraní případné zbytky jídla.

Tryska Plaque Seeker

Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak z dásňového žlábků a mezizubí. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlu 90 stupňů k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostor.



Tryska Zubní kartáček

Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte trysku do úst, hlavici kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte postupně všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.



přidat

Antibakteriální roztoky

Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj Waterpik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji z části teplou vodou z vodovodu a trysku namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

Antibakteriální roztok nesmí obsahovat alkohol, nebo esenciální oleje.

Údržba přístroje

- Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji z části teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundajte trysku z násadu a uložte ji do úložného prostoru.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru Waterpik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek opraví nebo vymění.

Likvidace

Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odevzdejte jej ve sběrně recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.



Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasa- zena	Sejměte trysku a znovu ji nasad'te
Tělo ústní sprchy: Z hadičky vedoucí k násadě teče voda	Poškozená hadička	Musí být vyměněna autorizovaným servisem
Nádrž teče	Chybí zátka nebo je zátka obráceně nasazená	Vyměňte zátku nádoby Obrat'te zátku
Nedostatečný tlak	Nádrž není správně usa- zena	1) Vyjměte a znovu nasad'te nádržku 2) Naplňte nádržku tekutinou 3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístoj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vyláchněte nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak prostřednictvím otočného regulátoru.
Není slyšet motor	Motor neběží	Ujistěte se, že elektrická zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Přepněte vypínač do polohy ON s větší razancí.
Máte přístroj zapnutý, tekutinu v nádrži a voda z trysky i přesto netryská	Pravděpodobně máte na rukojeti vypnutý přepínač (na pozici OFF) pro dočasné přerušení proudu vody	Přepněte přepínač na rukojeti do pozice zapnuto (ON)

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma Waterpik si vymáhá právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Záruční list

PRODUKT	RAZÍTKO	DATUM
Waterpik Ultra Professional WP660		

WTPMANWP660-2014-10