

Manuál k přenosnému ústnímu irigátoru Cordless Plus WP 450

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 13
Popis produktu	str. 14
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 15
Doporučená technika	str. 16
Péče o baterii	str. 18
Likvidace	str. 19
Údržba a servis přístroje	str. 19
Záruční doba	str. 19
Poruchy a jejich řešení	str. 20

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako při použití jiných elektrických přístrojů, tak i u WaterPik WP 450 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí. Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována. Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumísťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY neponořujte baterii do vody nebo do jiných tekutin.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- NIKDY nenabíjejte nabíječkou, která spadla do jakékoliv tekutiny. Okamžitě ji vypojte ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:


- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Udržujte nabíjecí jednotku a elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyvarujte se tekutin obsahujících pevné částice, jinak může dojít k ucpání trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.
- Pouze pro domácí použití.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!


Popis produktu

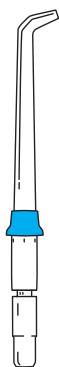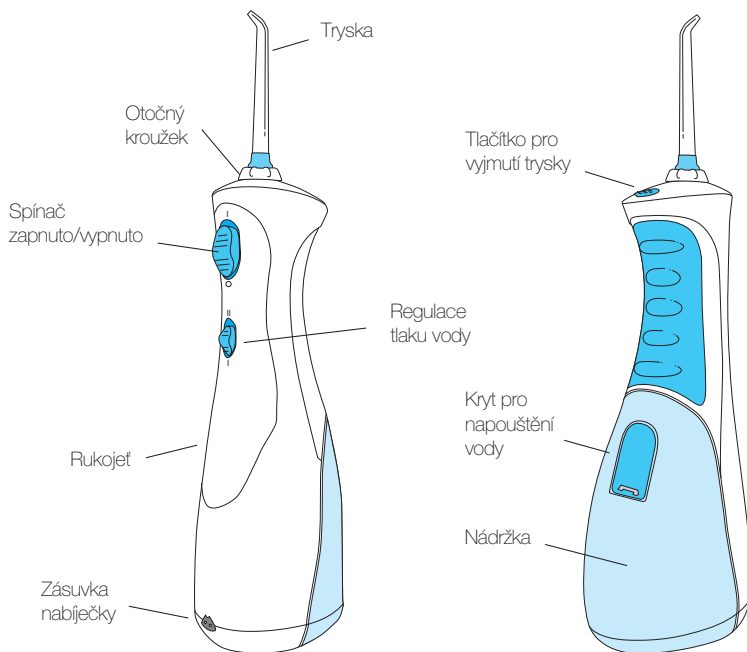


Tryska pro irigaci

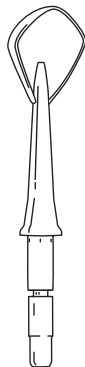


Tryska pro očistu jazyka

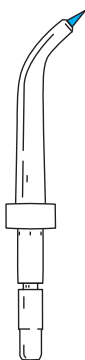


Tryska PIK Pocket

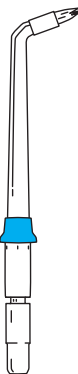

Ortodontická tryska

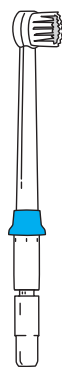

Tryska Zubní kartáček

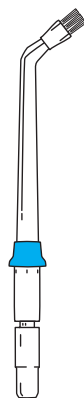


Tryska Plaque Seeker

Použití ústní sprchy – začínáme

Důležité!


Před prvním použitím přístroj nabíjete minimálně 24 hodin!!! Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Tlačítko musí být při nabíjení v pozici vypnuto "0", jinak se přístroj nenabije.

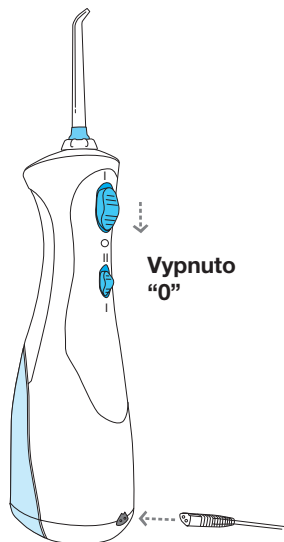

Důležité!



Po irigaci vždy vypněte přístroj

Elektrickou zástrčku vkládejte jen do standardní zásuvky elektrického napětí. Ústní sprcha Cordless Plus vydrží nabitá přibližně 1 týden, stav baterie závisí na četnosti používání přístroje.

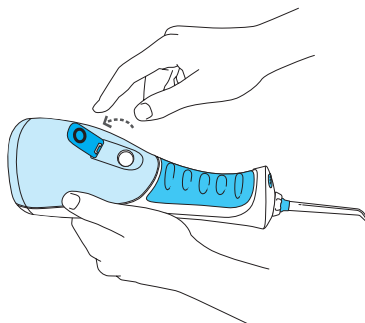

Naplňte nádržku:

Před plněním nádržky přístroj vždy odpojte od elektrické sítě! Odklopte krytku na nádržce a naplňte ji vlažnou vodou. Dle potřeby vodu doplňte.

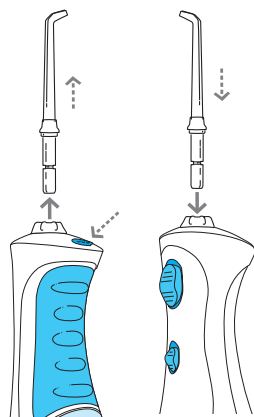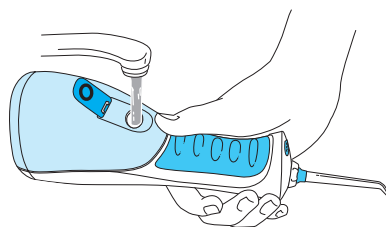


Vložení a vyjmutí trysky:

Vložte trysku do středu horního otvoru na rukojeti. Abyste měli trysku dobře nasazenou, musí být barevný kroužek přesně nasazen na otočném mechanismu.


Abyste vyjmuli trysku z rukojeti, zmáčkněte tlačítko pro vyjmutí trysky (viz obr.) a lehkým tahem trysku vyjměte.

Nastavení tlaku vody:


Tlak vody si můžete jednoduše nastavit posunutím spínače pro regulaci tlaku. Pozice "I" je vhodná pro jemnou irigaci citlivých dásní, pozice "II" je pro vyšší tlak, který je vhodný pro čištění mezi zuby a v linii dásní.

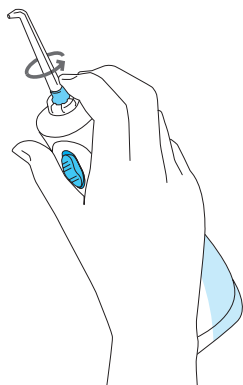

Vodní paprsek lze zamířit otáčením kroužku na konci držátka.


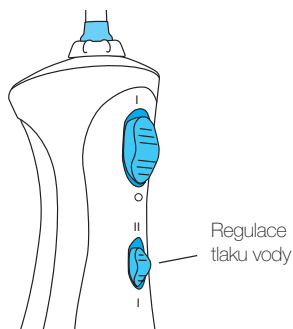


Při používání držte sprchu spíše kolmo, aby byl zajištěn nepřetržitý proud vody.

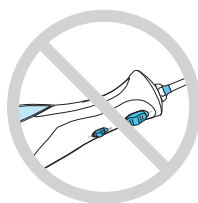


Doporučená technika




Nakloňte se nad umyvadlo, dejte trysku do úst a nasměrujte ji na zuby. Zapněte přístroj. Vodní paprsek vedte v pravém úhlu podél dásní. Jemně **přivřete ústa, aby voda z úst nestříkala, ale pouze stékala** do umyvadla.

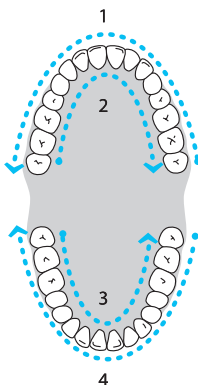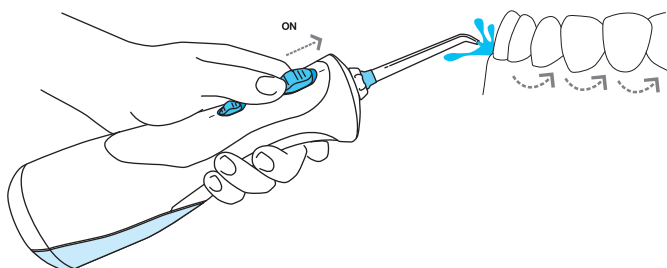

Začněte s očistou stoliček a systematicky posuňte vodní paprsek směrem k předním zubům. Posuňte trysku podél dásní a krátce se zastavte u každého mezizubního prostoru. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

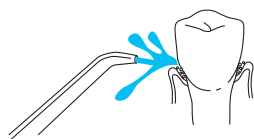


Jakmile skončíte, vypněte přístroj a vyprázdněte

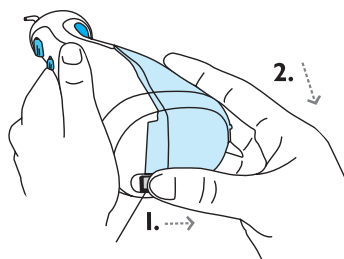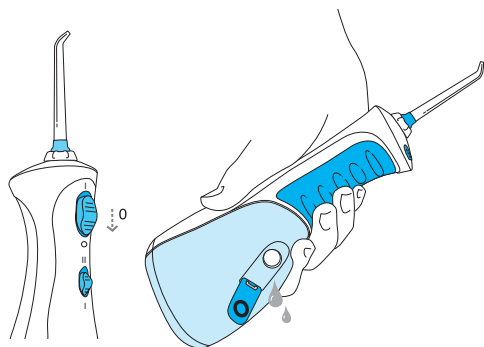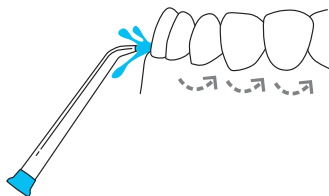


Nádržku můžete sejmut z rukojeti. Uvolněte záložku na spodní straně nádržky a vysuňte nádržku směrem dolů.

Uvolněte záložku na nádržce.

Nádržku jemně zasuňte směrem k horní části přístroje tak, aby byla správně usazena.

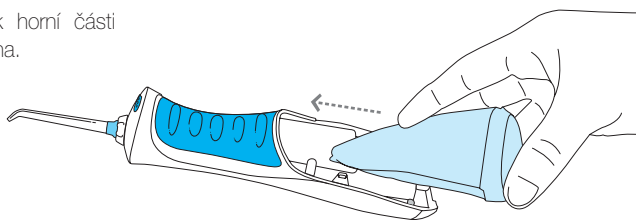


Speciální trysky

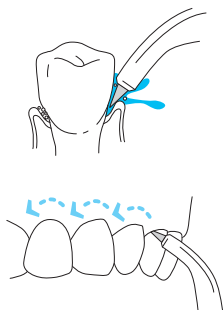


Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach paradontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte nejnižší hodnotu tlaku otočným regulátorem a zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek a okolí všech zubů. Čistěte dokud není nádržka prázdná.

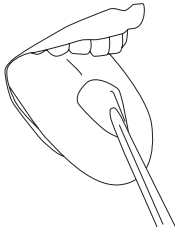

Tryska pro očistu jazyka

Přiložte trysku na jazyk a nastavte nejnižší hodnotu tlaku, kterou můžete později dle potřeby zvyšovat. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu.

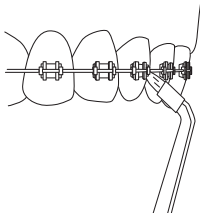

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných míst. Začněte s očištěm stoliček. Vodní paprsek vedte v pravém úhlu podél dásní. Jemně posunujte trysku podél dásní a krátce se zastavte u každého mezizubního prostoru a okolí ortodontických zámečků. Pokračujte dokud nejsou zuby ze všech stran očištěny.



Tryska Plaque Seeker

Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak z dásňového žlábků a mezizubí. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlu 90 stupňů k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostor.



Tryska Zubní kartáček

Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte trysku do úst, hlavicí kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistíte postupně všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.

Pro optimální výsledek doporučujeme měnit ortodontickou trysku po 6 měsících používání. Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.

Péče o baterii

Před prvním použitím nabíjejte 24 hodin pro úplné nabití baterie.

Jestliže používáte váš Waterpik jednou denně nebo méně, je doporučováno nabíjet baterii přes noc jednou týdně. Pokud používáte přístroj dvakrát denně nebo více, nabíjejte přístroj častěji. Nenechte přístroj úplně vybit, snižujete tím životnost baterie a bude třeba znovu nabíjet alespoň 24 hodin pro úplné nabití baterie.

Jestliže chcete irigátor na delší dobu uložit, a nebudete ho používat, vždy ho před uložením plně nabíjete. Nikdy neukládejte irigátor na delší čas, aniž by byla baterie plně nabitá. Pokud chcete prodloužit životnost baterie je vhodné nechávat přístroj připojený do přívodního kabelu a elektriny, kromě doby, kdy přístroj používáte.

LIKVIDACE

Přístroj obsahuje Nickel Metal Hydride baterii. Jakmile baterie ukončí svou životnost prosíme využijte vašeho nejbližšího sběrného dvora a nechte zde baterii ekologicky zlikvidovat dle zákonných požadavků.



Údržba přístroje

Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj mohl být vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdňte obsah nádrže a nechejte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek vymění nebo opraví.

Náhradní díly a příslušenství k ústní sprše Cordless Plus jsou k dostání v autorizovaných servisech. Při reklamaci či jakémkoliv dotazu uveďte sériové číslo, které je umístěno na spodní části výrobku.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku. Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka nebo nabíječky (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasazena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Z nádržky teče voda	<ol style="list-style-type: none"> 1) V nádržce zůstala tekutina 2) Nádržka je špatně usazena na rukojeti 3) Zátka na nádržce je otevřená 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Po použití nádržku vždy vyprázdněte 2) Sejměte nádržku a opět ji umístěte zpět dle návodu 3) Zavřete zátku na nádržce
Nedostatečný tlak – voda neproudí	<ol style="list-style-type: none"> 1) Přístroj je používán obráceně – tryskou směrem dolů 2) V nádržce je málo tekutiny 3) Nádržka je ucpaná 4) Tlak je nastaven v poloze "LOW" 5) Nádržka není správně umístěna 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pro zajištění správného tlaku musí být tryska ve vyšší poloze než nádržka 2) Naplňte nádržku tekutinou 3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevypřázdí. Poté vypláchněte nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak přepnutím spínače pro regulaci tlaku 5) Sejměte a znovu nasadte nádržku.
Přístroj nelze zapnout	Baterie není dobitá	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ujistěte se, že el. zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Vypněte přístroj a nabíjejte jej 16 hodin. 2) Ujistěte se, že jsou kontakty nabíječky čisté a volné

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@profimed.cz.
www.profimed.cz