

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra WP 100

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 1
Popis produktu	str. 2
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 4
Doporučená technika	str. 5
Údržba, servis přístroje	str. 6
Likvidace	str. 6
Poruchy a jejich řešení	str. 7
Záruční doba	str. 7

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u Waterpik Ultra WP 100 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti děti.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtete si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumísťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
- NESÁHEJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:



- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskoďte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností Waterpik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností Waterpik Technologies.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyvarujte se používáním tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpání trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!


Popis produktu

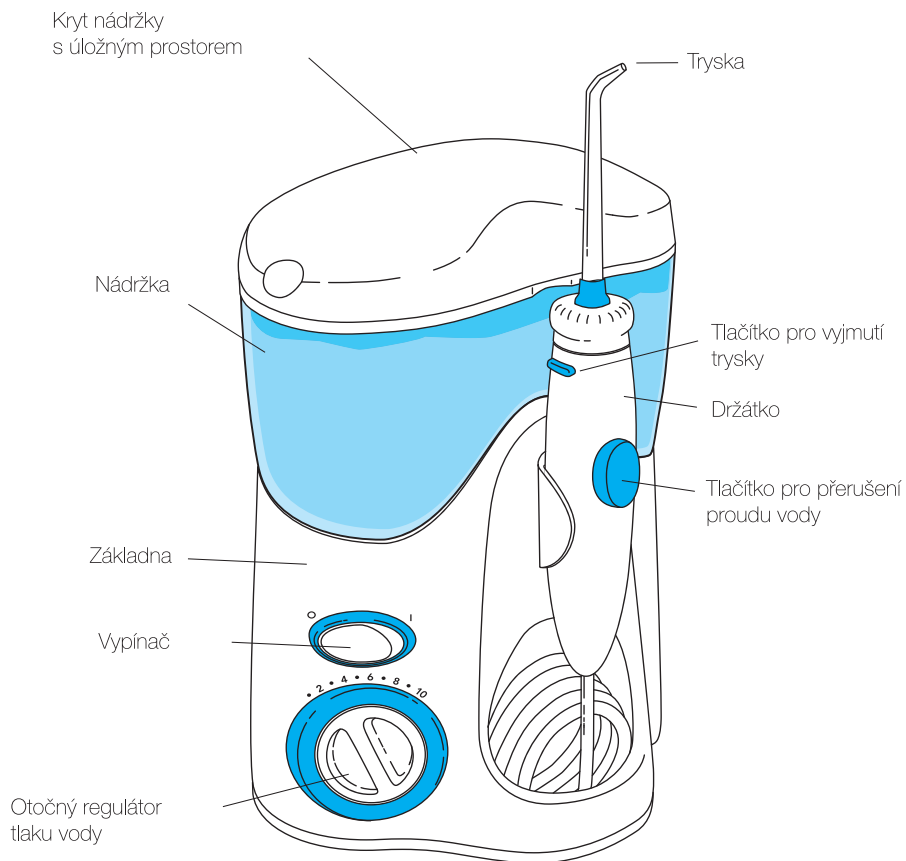


Popis produktu

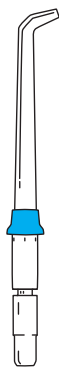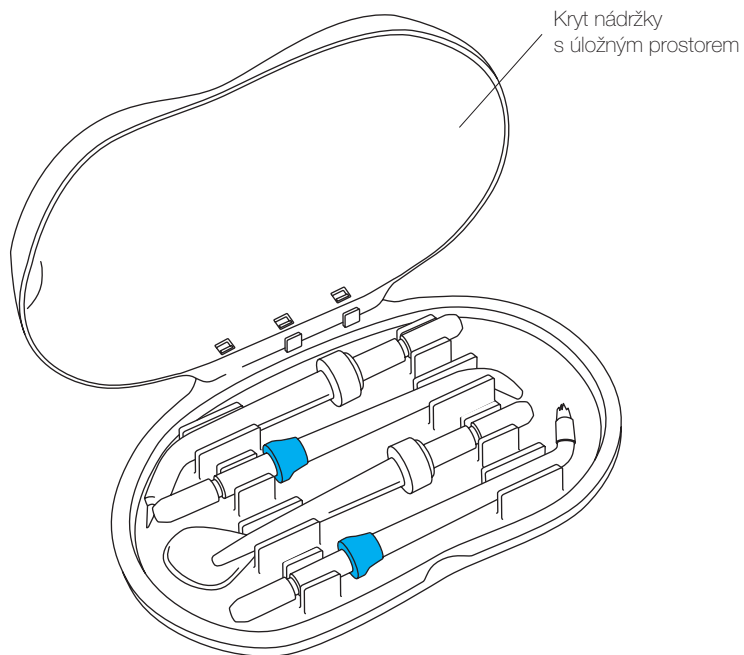


Tryska pro irigaci

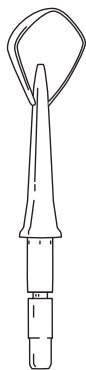


Tryska pro očistu jazyka

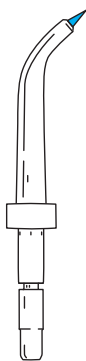

Tryska Plik Pocket

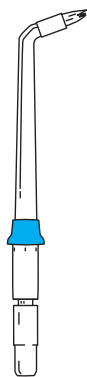

Ortodontická tryska


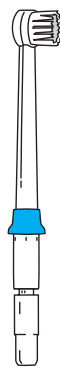


Tryska Zubní kartáček




Tryska Plaque Seeker

Použití ústní sprchy – začínáme

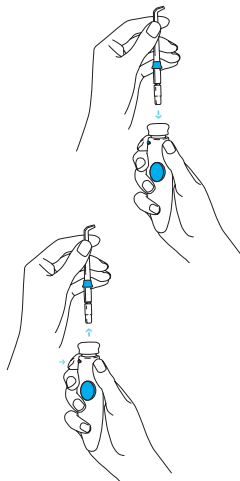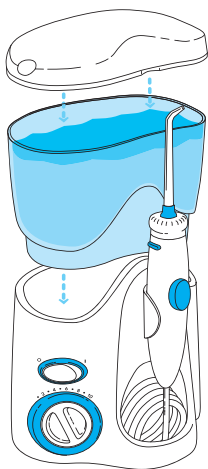

Nastavení tlaku vody:

Při prvním použití přístroje nastavte otočný regulátor tlaku na podstavci na nejnižší hodnotu. Při dalším použití postupně zvyšujte tlak vody na hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje nebo dle doporučení zubního lékaře.

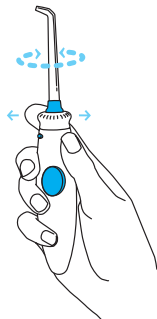

Nádrž:


Vyjměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou, do které můžete přidat ústní vodu nebo jiné antibakteriální či hojivé roztoky. Umístěte nádrž na základnu irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů.

Trysky:

Vyberte si svoji barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryška správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka. Trysku vyjmete z držátka zmáčknutím tlačítka pro vyjmutí trysky.

Vložení trysky do úst:


Vložte tryšku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem.

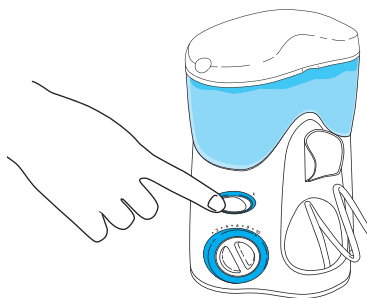

Směr irigační trysky a vodního paprsku lze regulovat otáčením kroužku na konci držátka. Stisknutím tlačítka pro "přerušení proudu vody" můžete krátkodobě přerušit irigaci.

Doporučená technika

Vedte vodní paprsek v pravém úhlu podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posuňte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostorů. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

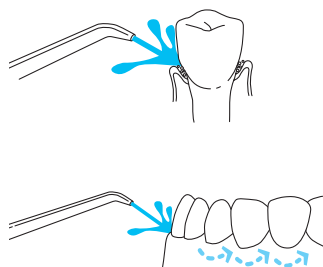


Tlačítko pro přerušení proudu vody:

Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody kdykoli dočasně přerušit.

Ukončení irigace:


Po ukončení irigace volnou rukou přístroj vypněte. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí trysky umístěné pod otočným kroužkem a hlavu trysky vytáhněte z násady irigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z el. zásuvky.

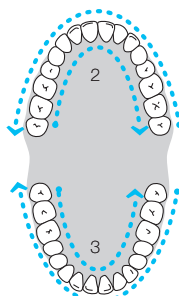

Speciální trysky:


Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach paradontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné paradontální choboty.

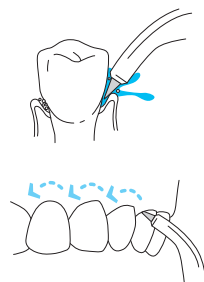


Tryska pro očistu jazyka

Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

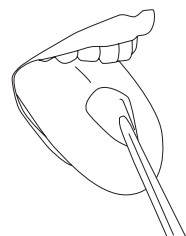

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných ploch okolo drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou očištěte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která odstraní případné zbytky jídla.

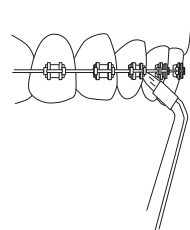

Tryska Plaque Seeker

Únikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak z dásňového žlábků a mezizubí. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlu 90 stupňů k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostor.



Tryska Zubní kartáček

Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte trysku do úst, hlavicí kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte postupně všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.



Antibakteriální roztoky

Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj Waterpik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a trysku namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

Údržba přístroje

- Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdňte obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje. Více o přípravku a jeho použití na str. 22.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru Waterpik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek opraví nebo vymění.

Likvidace

Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odevzdejte jej ve sběrně recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.



Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasa- zena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Tělo ústní sprchy: Z hadičky vedoucí k násadě teče voda	Poškozená hadička	Musí být vyměněna autorizovaným servisem
Nádrž teče	Chybí zátka nebo je zátka obráceně nasazená	Vyměňte zátku nádoby Obratě zátku
Nedostatečný tlak	Nádrž není správně usa- zena	1) Vymějte a znovu nasadte nádržku 2) Naplňte nádržku tekutinou 3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vypláchněte nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak prostřednictvím otočného regulátoru.
Není slyšet motor	Motor neběží	Ujistěte se, že elektrická zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Přepněte vypínač do polohy ON s větší razancí.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.
Záruka se nevztahuje na trysky, ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma Waterpik si vymíňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.