


## WHITENING KIT

Whitening Accelerator & 3 x Whitening Gel

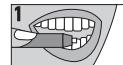

### Inhaltsstoffe/Ingrédients/Ingredients/Ingredienzen:

Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Phytate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Cellulose Gum, Sorbitol, Citric Acid, Sodium Hypochlorite, Mentha Piperita Oil, Menthol, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Limonene, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract



[facebook.com/smilepen](http://facebook.com/smilepen)  
[instagram.com/smilepens](http://instagram.com/smilepens)

[www.smilepen.ch](http://www.smilepen.ch)  
info@smilepen.ch

SwissWhite GmbH  
Bleigasse 11A  
CH-6340 Baar/ZG – Switzerland

smp products GmbH  
Peter may Strasse 8  
6020 Innsbruck – Austria

Kühl und Trocken aufbewahren  
Store in a cool and dry place  
Conserver dans un endroit frais et sec  
Conservare in luogo fresco e asciutto  
Koel en droog bewaren

Made in P.R.C.

3 x 5 ml

**Das Zahnaufhellungsset für eine Aufhellung um bis zu 70% in sieben Tagen. Das Whitening Kit besteht aus einem LED-Accelerator und 3 Gelstiften. Der LED-Accelerator wird über das USB-Kabel mit Smartphone-Strom betrieben.**

#### Anwendung

1. Reinigen Sie Ihre Zähne mit einer Zahnbürste.
2. Nun drücken Sie solange am Ende des Pens, bis Bleaching Gel austritt.
3. Tragen Sie das Gel auf alle sichtbaren Zähne gleichmäßig auf. Achten Sie darauf, dass das Gel Ihn Zahnhfeasicht nicht berührt.
4. Umschließen Sie das Whitening LED mit den Lippen und starten Sie die Zahnaufhellung über den Timerknopf.
5. Je nach Grad der Verfärbungen können Sie das Bleaching Gel für 15–30 Minuten einwirken lassen.
6. Entfernen Sie den Accelerator und waschen Sie den Mund mit warmem Wasser aus. Anschließend können Sie das überschüssige Gel mit einer Zahnbürste und Zahnpasta entfernen. Die Home Bleaching Produkte werden ganz einfach mit Wasser gereinigt.
7. Sie können das Zahnbleaching einmal täglich anwenden, bis das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht.

#### Empfehlung

Vor der ersten Anwendung stellen Sie sicher, dass Sie keine unbehandelten Karies oder Gingivitis haben. Im Zweifel lassen Sie sich vor der Anwendung von einem Zahnarzt beraten. Bitte beachten Sie, dass es natürliche Unterschiede in der Zahnfarbe des Menschen gibt. Ein dunklerer Ton der Zahnfarbe lässt sich nicht in einen ganz hellen verwandeln, auch nicht durch eine längere Anwendungsdauer. Machen Sie ein Vergleichsfoto ihrer Zähne vor der ersten Behandlung, um die Verbesserung besser beurteilen zu können.

Bei Auftreten von Empfindlichkeitsreaktionen wie gereiztes Zahnhfeasicht oder schmerzempfindlichen Zähnen, reduzieren Sie die Anzahl und die Dauer der Anwendungen, um die Symptome zu mindern, ohne jedoch ganz auf die Anwendung verzichten zu müssen. Die Empfindlichkeit des Zahnhfeasichtes und der Zähne ist meist vorübergehend und sollte nach Beendigung der Anwendung innerhalb von wenigen Tagen restlos verschwinden.

Die Verwendung einer speziellen Zahncreme für empfindliche Zähne hilft zusätzlich.

Bitte beachten Sie, dass die Anwendung des Produkts auf eigene Gefahr erfolgt und für fehlerhafte Anwendung jede Haftung abgelehnt wird.

#### Warnhinweise

- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist
- Vor der ersten Anwendung Ihren Zahnarzt konsultieren
- Vor der Anwendung innenliegende Benutzer- und Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen
- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt
- Anwendung während maximaler 7 aufeinander folgender Tage und nicht mehr als einmal pro Tag
- Gelegentlich kommt es bei der Anwendung zu gereiztem Zahnhfeasicht sowie schmerzempfindlichen Zähnen.
- Nicht anwenden bei unbehandelter Karies und keiner Gingivitis
- Falls gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe allergisch sind, kontaktieren Sie bitte vor einer Anwendung Ihren Zahnarzt
- Produkt von Kindern fernhalten

**Le Whitening Kit pour un blanchiment des dents de jusqu'à 70 % en sept jours. Le Whitening Kit se compose d'un LED-Accelerator et de trois stylus gel. Le LED-Accelerator fonctionne avec l'électricité du Smartphone en le raccordant au moyen d'un câble USB.**

#### Utilisation

1. Nettoyez vos dents avec une brosse à dents.
2. À présent, appuyez sur l'extrémité du Pen jusqu'à ce que le Bleaching Gel apparaisse.
3. Appliquez le gel uniformément sur toutes les dents visibles. Assurez-vous que le gel ne touche pas vos gencives.
4. Entourez le Whitening LED avec vos lèvres et commencez le blanchiment des dents en appuyant sur la touche de minuterie.
5. Vous pouvez laisser agir le Bleaching Gel de 15 à 30 minutes selon le degré de décoloration des dents.
6. Retirez l'Accelerator et rincez-vous la bouche avec de l'eau chaude. Vous pouvez ensuite enlever l'excédent de gel avec une brosse à dents et du dentifrice. Les produits Home Bleaching peuvent être tout simplement nettoyés avec de l'eau.
7. Vous pouvez répéter la procédure de blanchiment une fois par jour jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat souhaité.

#### Conseils

Avant la première utilisation, assurez-vous que vous n'avez pas de carie non soignée ou de gingivite. En cas de doute consultez un dentiste avant toute utilisation. Considérez le fait que la couleur des dents varie naturellement d'un individu à un autre. Une couleur plus sombre des dents ne se laisse pas beaucoup déclaircir, même avec une application plus longue. Faites une photo pour comparer la couleur de vos dents avant la première application, afin de mieux évaluer l'amélioration.

En cas de réaction d'hypersensibilité telle que l'irritation de la gencive ou l'hypersensibilité des dents à la douleur, réduisez le nombre et la durée des applications pour diminuer les symptômes, sans pour autant devoir renoncer complètement au traitement. La sensibilité des gencives et des dents est la plupart du temps temporaire et devrait disparaître totalement en quelques jours une fois terminée l'application.

L'utilisation d'une crème spéciale additionnelle pour dents sensibles peut vous aider.

Veuillez noter que l'utilisation du produit s'effectue à vos propres risques et périls et toute responsabilité est déclinée en cas d'utilisation incorrecte.

#### Avertissements

- Évitez tout contact avec les yeux
- Rincer immédiatement avec de l'eau si le produit entre en contact avec les yeux
- Consulter votre dentiste avant la première application
- Lire attentivement les informations d'utilisation et de sécurité avant toute application
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 18 ans
- Application pendant 7 jours consécutifs maximum et pas plus qu'une fois par jour
- Il peut se produire de façon occasionnelle une irritation de la gencive ou une hypersensibilité des dents à la douleur
- Ne pas utiliser en cas de carie non soignée ou de gingivite
- En cas d'allergie à un ou plusieurs des composants, consultez votre dentiste avant utilisation
- Tenir hors de portée des enfants

**Kit per lo sbiancamento dei denti per uno sbiancamento fino al 70% in sette giorni. Whitening Kit è composto da un acceleratore a LED e 3 penne in gel. L'acceleratore a LED è alimentato tramite il cavo USB per smartphone.**

#### Applicazione

1. Pulire i denti con uno spazzolino da denti.
2. Premere sull'estremità della penna fino a quando fuoriesce il gel sbiancante.
3. Applicare il gel in modo uniforme su tutti i denti. Assicurarsi che il gel non entri in contatto con le gengive.
4. Trattenere Whitening LED con le labbra e iniziare a sbiancare premendo il pulsante del timer.
5. A seconda del grado di decolorazione, lasciar agire il gel sbiancante per 15–30 minuti.
6. Estrarre l'acceleratore e risciacquare la bocca con acqua calda. Ora rimuovere il gel in eccesso con spazzolino e dentifricio. I prodotti Home Bleaching vengono risciacquati semplicemente con acqua.
7. Lo sbiancamento denti può essere effettuato una volta al giorno fino al raggiungimento del risultato desiderato.

#### Consigli

Prima di effettuare la prima applicazione, assicurarsi di non avere nessuna caria non curata o gingivite. In caso di dubbio consultate un dentista prima di procedere con l'applicazione. Considerate il fatto che esistono differenze naturali del colore dei denti tra gli individui. Un colore più scuro non si lascia sbiancare molto, anche con un'applicazione più lunga. Fate una foto per confrontare i Vostri denti prima dell'applicazione per poter valutare il miglioramento.

In caso di reazioni di ipersensibilità come gengive irritate o denti ipersensibili al dolore, ridurre il numero e la durata delle applicazioni per diminuire i sintomi, senza però dover rinunciare completamente alle applicazioni.

L'ipersensibilità delle gengive è nella maggior parte dei casi transitoria e dovrebbe sparire totalmente in pochi giorni dopo l'ultima applicazione.

L'utilizzo di una crema speciale aggiuntiva per i denti può aiutare.

Considerate che l'utilizzo del prodotto si intende a proprio rischio e pericolo ed ogni responsabilità per un utilizzo scorretto verrà respinta.

#### Avvertimenti

- Evitare il contatto con gli occhi
- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciaccuarlo immediatamente
- Consultare il vostro dentista prima del primo utilizzo
- Questo prodotto non è destinato a essere usato da persone di età inferiore a 18 anni
- Applicare al massimo durante 7 giorni consecutivi e non più di una volta al giorno
- Durante l'applicazione, possono apparire in modo occasionale sia un'irritazione della gengiva che un'ipersensibilità del dente al dolore
- Non utilizzare in caso di carie non curata o di gingivite
- In caso di allergia ad uno o più dei componenti, consultare un dentista prima dell'applicazione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

**Sada na bělení zubů pro vybělení až o 70 % za sedm dní. Bělící sada obsahuje LED uchylovac a 3 gelová pera. LED uchylovac je napájen pomocí USB kabelu z chytrého telefonu.**

#### Použití

1. Kartáček si vycistěte zubařy.
2. Zadáte na konec pera, dokud se neobjeví bělící gel.
3. Gel rovnoraměn nanášejte na všechny viditelné zuby. Ujistěte se, že se gel nedostane do kontaktu s vašimi dásnami.
4. Uzavřete bělící LED uchylovac svými rty a pomocí Casovacho číškou začněte s bělením.
5. V závislosti na stupni zabarvení můžete nechat gel použít 15–30 minut.
6. Vymýte uchylovac a vypáchněte ústa teplou vodou. Poté za použití kartáčku a Zubní pasty odstraněte nadbytečný gel. Produkty pro domácí bělení se snadno čistí vodou.
7. Bělení zubů můžete provádět jednou denně, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

#### Doproručení

Před prvním použitím se ujistěte, že nemáte žádné neosetřené zuby kazy nebo zánět dásní. Pokud si nejste jisti, podepte se před použitím s Zubním lékařem. Vezměte prosím na vědomí, že se barevnost lidských zubů pohybuje v šíři. Tmavší odstín zubů nelze změnit na velice světlý odstín, ani po delším používání. Vyzývám když se během používání necháte zoubek vypadat výrazněji než ostatní. Tím pádem se vám bělení zoubků může výrazně zlepšit.

Pokud máte citlivé zuby, jako např. podrážděné dásně nebo zoubky citlivé na bolest, snížte počet a dobu trvání osetření, abyste snížili příznaky a nemuseli se tak uphnout vzdáleně osetření. Citlivost dásní a zubů je obvykle docasné a měla by zoubek zmitzit během několika dní po osetření.

Také pomůže použít Zubní pasty na citlivé zuby.

Vezměte prosím na vědomí, že použití produktu je na vaše vlastní riziko a jakákoli odpovědnost za neprávné použití bude odmítnuta.

#### Upozornění

- Vyvarujte se kontaktu s očima
- Oči ihned opláchněte, pokud se produkt s nimi dostal do kontaktu.
- Před prvním použitím se podepte s lékařem
- Před použitím si důkladně prostudujte uživatelské a bezpečnostní informace.
- Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let.
- K použití maximálně 7 po sobě jdoucích dní a ne častěji než jedenkrát denně
- Během používání může příležitostně dojít k podráždění dásní nebo zoubku
- Produkt nepoužívejte, pokud máte neosetřené kazy a zánět dásní.
- Pokud jste alergický na jednu nebo více složek, nechte produkt v dálce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí

#### Figyelemzet

- Kerülje a termék szemmel való érintkezését!
- Öblítse ki a szemét azonnal, ha a termék belekerül.
- Előtől használattól előkérdezze meg fogorvosát.
- Használattól előtt figyelmesen olvassa el a csomagban található felhasználói utmutatót és a biztonsági tájékoztatót.
- A termék 18 évnél idősebb felhasználók számára készült.
- 7 egymást követő nap alkalmazandó, naponta egyetlen nem többször.
- A használt során esetenként előfordulhat, hogy íny irritációt tapasztal és a fogai megfájdulnak.
- Ha van ne működik fog, vagy ingyulladása van, tartózkodjon a termék használattól.
- Ha bármielőkötött allergiás, kerje ki fogorvos a véleményét használattól.
- Nincs használható a termék gyermekkel.
- Tartsa a termékkel gyermekkel!

**A fogfehérítő szett, amely akár 70%-os fehérítést eredményezhet nap alatt. A fogfehérítő szett egy LED gyorsítóval és 3 zselé tollból áll. A LED gyorsító USB kábellel, egy okostelefon elektromos teljesítményével működik.**

#### Hasznalat

1. Tisztítja meg fogat fogkével.
2. Nyomja a toll végét addig, míg a fehérítő zselé ki nem jön.
3. Vigye fel a zselét egyenletesen minden látható fogfelületre. Ügyeljen arra, hogy a zselé nem érintkezzen az ínyvelével.
4. Uzaverte bělící LED uchylovac svými rty a pomocí Casovacho číškou začněte s bělením.
5. V závislosti na stupni zabarvení můžete nechat gel použít 15–30 minut.
6. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a száját meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel. A Home Bleaching (házi használatra készült fehérítő) termékek egyszerűen, vizel tisztíthatók.
7. A fehérítő zseléjét az elszíneződés mértékétől függően 15–30 percen hagyja hatni.
8. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel. A Home Bleaching (házi használatra készült fehérítő) termékek egyszerűen, vizel tisztíthatók.
9. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
10. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
11. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
12. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
13. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
14. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
15. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
16. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
17. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
18. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
19. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
20. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
21. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
22. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
23. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
24. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
25. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
26. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
27. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
28. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
29. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
30. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
31. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
32. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
33. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
34. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
35. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
36. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
37. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
38. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
39. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
40. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
41. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
42. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
43. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
44. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
45. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
46. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
47. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
48. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
49. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
50. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
51. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
52. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
53. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
54. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
55. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
56. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
57. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
58. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
59. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
60. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
61. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
62. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
63. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
64. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
65. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
66. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
67. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
68. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
69. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
70. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
71. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
72. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
73. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
74. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
75. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
76. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
77. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
78. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
79. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
80. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
81. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
82. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
83. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
84. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
85. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
86. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
87. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
88. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
89. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
90. Távolítsa el gyorsítóval, és öblítse ki a szájat meleg vizrel. Ezután távolítsa el a folyósleges zseléit egy fogkével és fogkémellel.
91. A fehérítő zseléjét a gyorsítóval hagyja hatni.
92. T

